

\*『歯美 ing』は『磨く』⇒□毎日 10 分『撫でる』に世界の歯ブラシの概念を変える革命的歯ブラシです！→『摘まみ撫で歯ブラシ』なのです。

#### 【購入方法】

##### ①医療法人社団ニコニコクラブ

<http://niconicoclub.com/>

説明は下記の上記ボタンで移動して

<http://dr-kyosuke.jimdo.com/>

ユーチューブ 1

<https://m.youtube.com/watch?v=kVv7pNaO9hA>

ユーチューブ 2

<https://m.youtube.com/watch?v=P1F4rKcToKA>

##### ②amazon

<https://www.amazon.co.jp/%E6%AD%AF%E7%BE%8Eing/dp/B0117XXXQ6>

#### 【販売希望歯科医院】

上記、医療法人のニコニコクラブに連絡ください。

あるいは、[niconicoclub.pc@icloud.com](mailto:niconicoclub.pc@icloud.com) に連絡ください。

#### 【歯美 ing 使用法はさらに進化しました】

『磨く』⇒□日 10 分間『撫でる』へ！

##### ①歯肉炎や歯周病予防

蓑虫のように、ねじ回しのように 1 本 1 本ツイストしていき、歯間は左右に振動、すべての歯肉を。→的確にあたっていれば 1 日 10 分撫でるだけでほとんど出血止まります。→プラーク(バイ菌軍)を覆う皮膜を破るだけで、バイ菌軍が解散し、毒素を出さなくなります。→出血止まらない所は毛先があたっていないだけです。→ゴルフのグリップ、スタンス、を教えるレッスンプロのように『歯美 ing』の柄の方向性と角度を歯科医や歯

科衛生士が指導すれば良いだけです。→介護関係や難しい歯ブラシ指導が合理的にシステムの指導できます。


## ②虫歯予防

磨き方もシステム化できます。

奥歯は四角形なので、片方の毛先を噛む面に直角に立たせてみがいてもらいます。  
→片方毛先が頬面や舌面の歯面を自動的に磨いてくれます。

前歯は三角形なので、角度を傾かせて、毛先の内側を小さな手で磨くように丁寧に磨かせてください。

③孤立歯や下顎2歯根や上顎3歯根の根分岐部もツイストと左右の振動のワンパターン動作で撫でる事ができます。

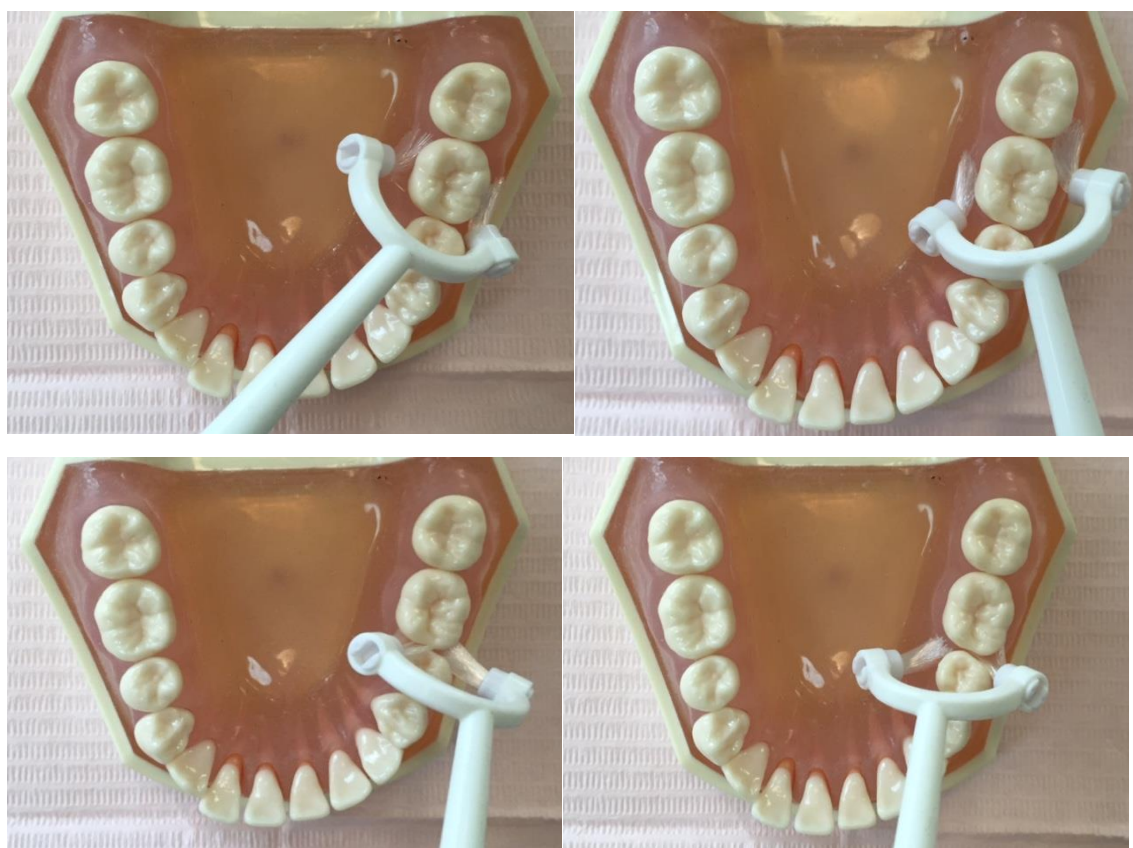



プラークの皮膜は撫でるだけで破れるのです。

そうすると毒素出すバイ菌軍が減り、歯肉が正常になり毛のうが勝手に浅くなり、ますます、楽に健康になるのです。

ゴシゴシやりすぎると、隙間を飛ばして磨いていたり、細かな傷ができて、そこにバイ菌が繁殖し、しっかりと出血が止まらないのです。

原始人は木の小枝をさいて歯肉をマッサージしているだけで悪くならなかったのかもしれませんが。